



第19回みえ福祉用具 アイデアコンクール2024



受賞作品集


受賞	作品名	受賞者
最優秀賞	ORUSTRAND CLUTCH	土井 悠翔 様
優秀賞	スベランカー	矢野 順彦 様
	ユニバー	三宮 桃香 様
三重県作業療法士会賞	CANNAIL	篠川 優 様
日本福祉用具供給協会 三重県ブロック賞	ラクもち	菊山 百華 様
三重テレビ放送賞	おとめさん	山本 裕子 様
伊勢新聞社賞	ラベルくん	牧主 敦孝 様

主催：三重県
三重県身体障害者総合福祉センター

最優秀賞

「ORUSTRAND CLUTCH」

土井 悠翔 様

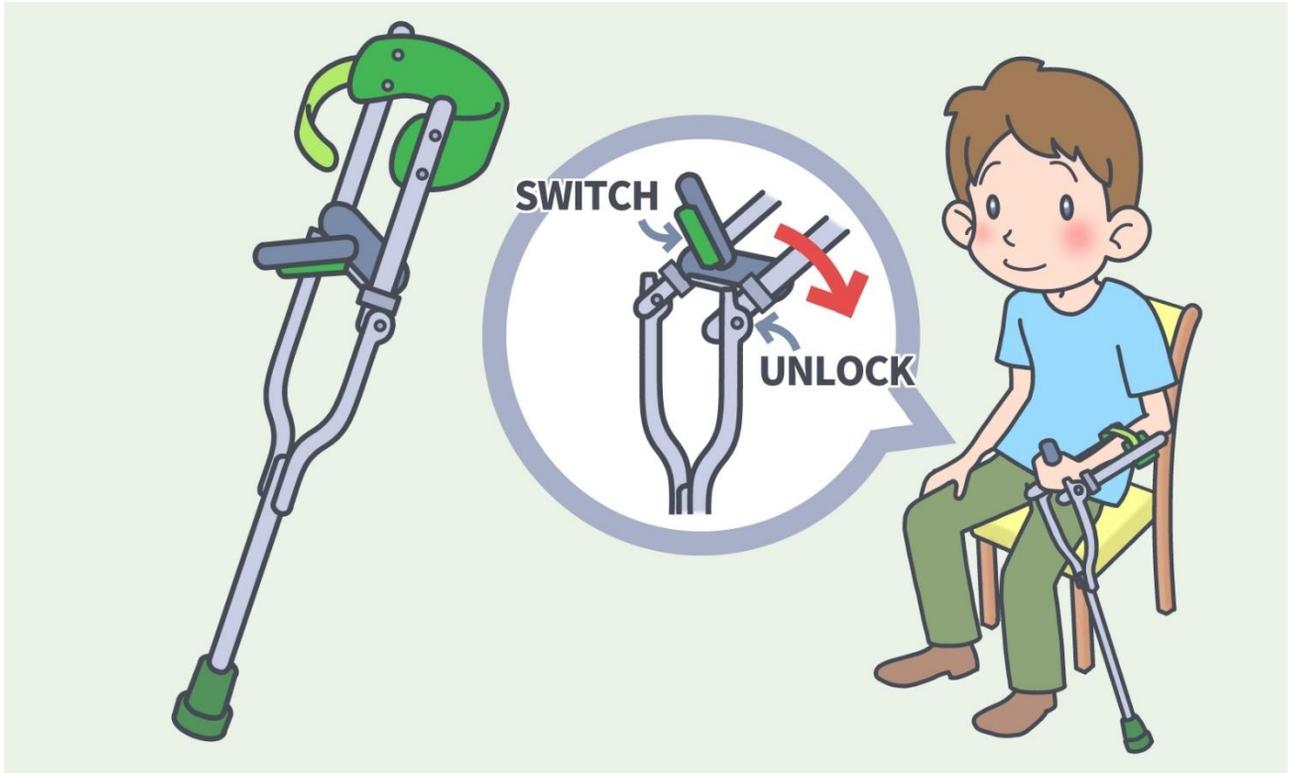

【使い方】

通常のロフストランド・クラッチは長いため、電車やバスに乗った時他の乗客に当たってしまうことがあります。

この作品は、ロフストランド・クラッチのグリップにあるスイッチを握りながら座ると、クラッチが曲がり電車やバスの中で対面にいる人の邪魔になりません。そして、立ち上がるとロックが固定されます。


【講評】

市販されている折りたたみの杖は、持ち運びしやすいようにコンパクトにするのが目的ですが、この作品は椅子からの立ち上がり動作にも使える点も評価されました。

優秀賞

「スベランカー」

矢野 順彦 様

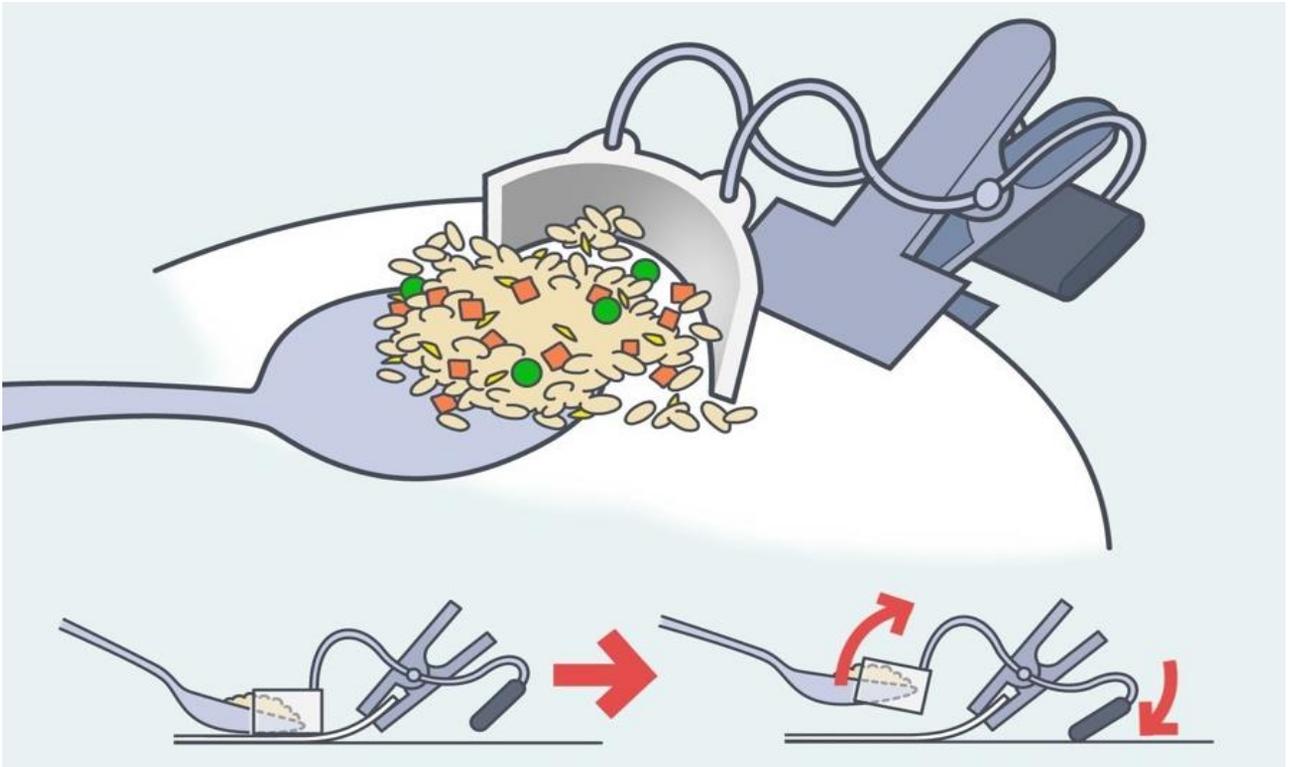

【使い方】

上肢が欠損している方や片麻痺の方、また発達障害などスプーンで食べ物をすくう力加減を調節できない方に考案されたアイデアです。

この作品は、食べ物が逃げていかないようにするストッパー部、クリップと一体化した回転部、お皿が動かないようにするゴム支持部で構成されています。

食べ物をストッパー部で逃げないようにして集め、スプーンを持ち上げる時にストッパー部が斜め上方向に回転して食べ物をスプーンに入れ、ゴム支持部がテーブルを押さえてお皿が滑らないようになっています。


【講評】

スプーンで押す力がゴム支持部でテーブルを押す力になり、お皿が滑らないことが評価されました。

優秀賞

「ユニバー」

三宮 桃香 様

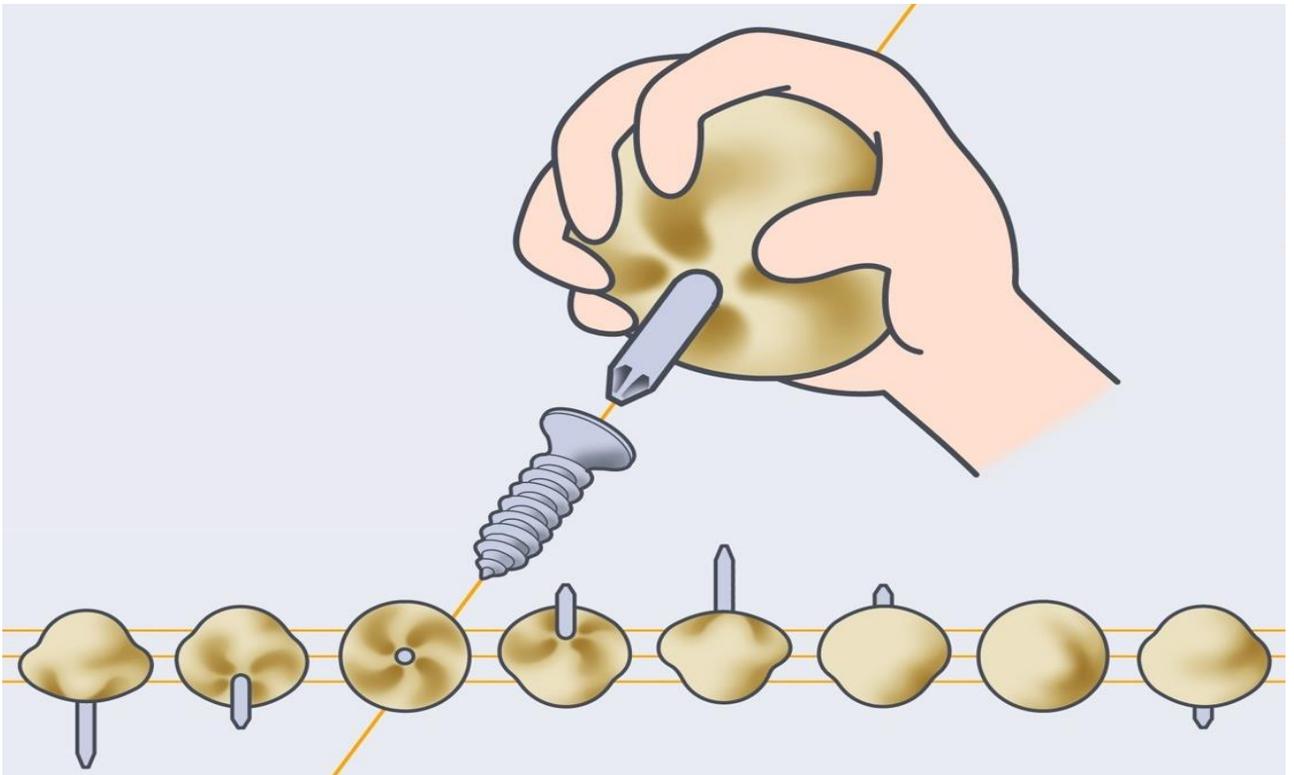

【使い方】

握力が弱い高齢者や、触覚が低下している方、親指が使えない方でも使えるというドライバーのアイデアです。

従来のドライバーは回転軸が不安定で回転できる角度も小さいため握力が低下したり親指が使えなくなった場合にとっても使いにくい形状です。

この作品は、持ち手が短いため回転軸が安定し、回転する方向に持ち替えやすい形状です。また、ドライバーを押さえる力が入りやすく、手のひらに痛みの出ない形状でもあります。


【講評】

今までにない形状のドライバーであることが評価されました。

三重県作業療法士会賞

「CANNAIL」

篠川 優 様

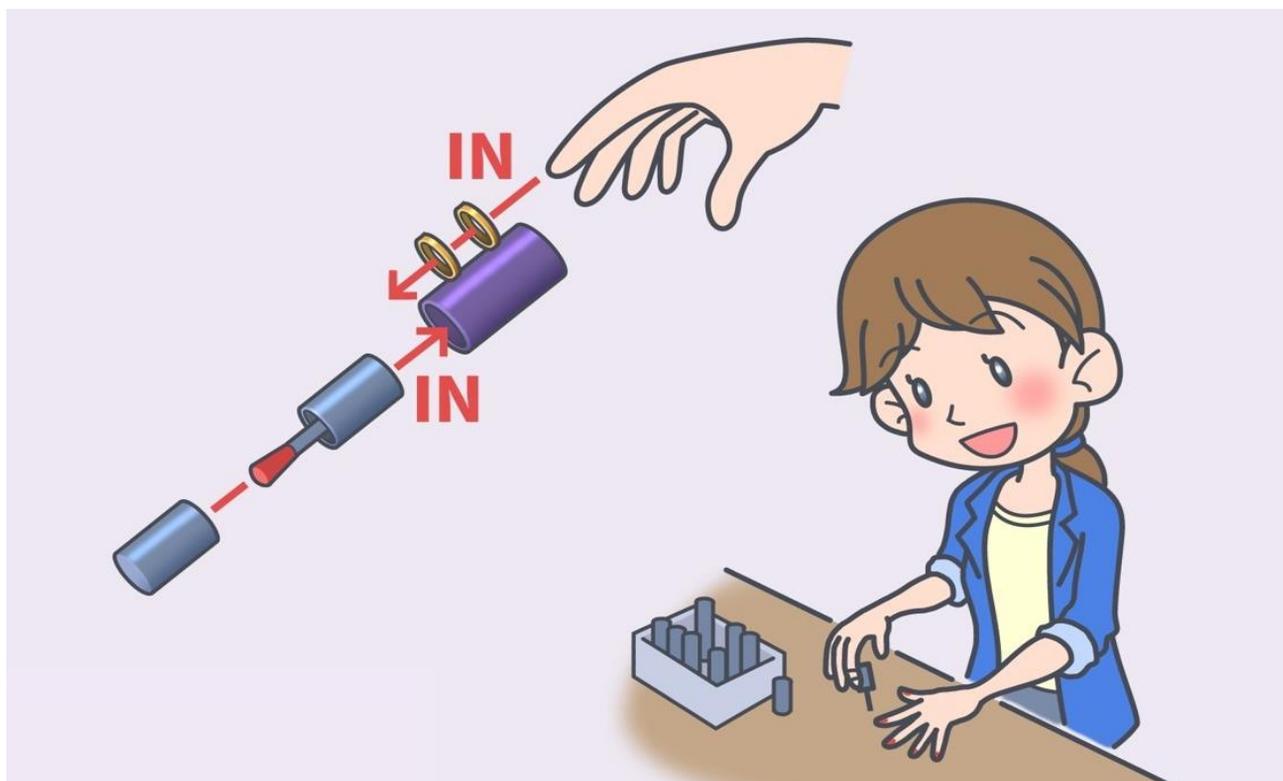

【使い方】

片麻痺の方が麻痺していない手の爪にマニキュアを塗るアイデアです。

使い方は、マニキュアの蓋を用具の筒状の部分に差し込んだ後、用具の指輪部分に麻痺している手の指を通します。そして、麻痺していない手を動かしてマニキュアを塗ります。用具の筒状の部分は、マニキュアの蓋部分を差し込んだあと、下に向けても振っても落ちない構造になっています。また、用具の指輪部分は大きさを調節することができます。


【講評】

片麻痺の方でも簡単にマニキュアを塗れることが評価されました。

日本福祉用具供給協会
三重県ブロック賞

「ラクもち」

菊山 百華 様

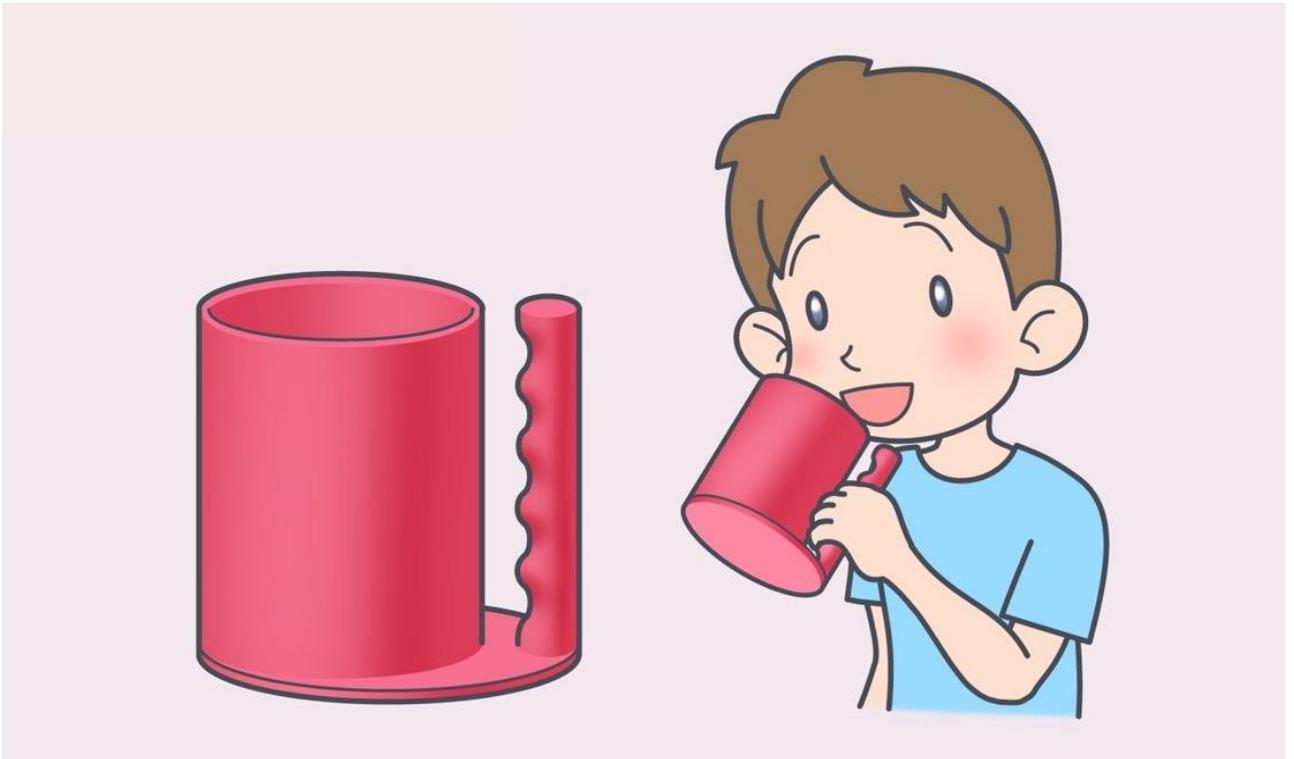

【使い方】

麻痺などで手が拘縮している方が持ちやすいコップのアイデアです。従来のコップは持ち手がコップの上の方から伸びていますが、このアイデアはコップの下の方から持ち手が伸びています。麻痺などで握り込んだ手を持ち手の上の方から差し込むことでコップを持つことができます。持ち手は太くて、へこみがある握りやすい形状でコップ全体は丈夫で軽い素材となっています。


【講評】

コップの下の方から持ち手を伸ばすという逆転の発想が評価されました。

三重テレビ放送賞

「おとめさん」

山本 裕子 様

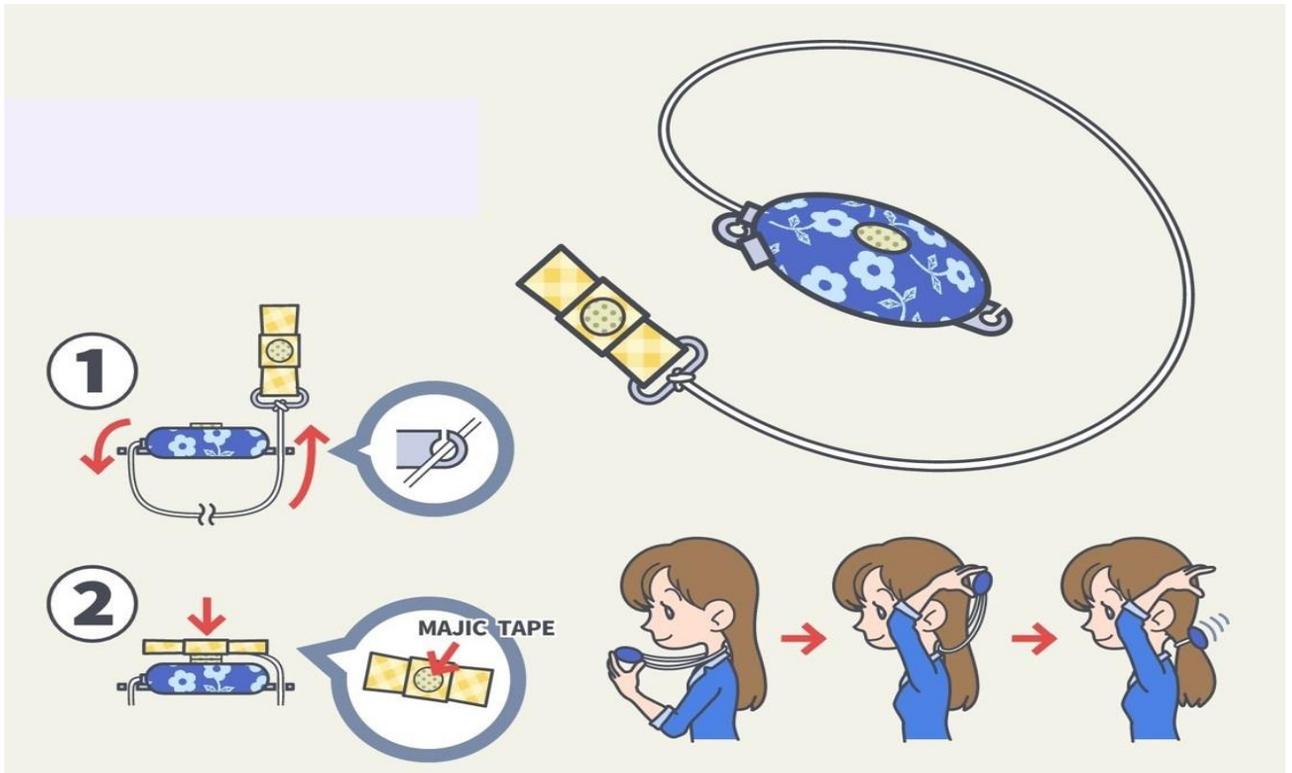

【使い方】

上肢が欠損している方や、片麻痺などの方が片手で髪の毛を一つに束ねるというアイデアです。

用具の中にはリール式の紐が入っています。まず、用具の紐を引き出しストッパーで長さを調節してリボン部分を本体にくっつけて輪にしてから首にかけます。髪の毛を引き出した後、用具を耳の上まで引き上げ、ストッパーを外すと紐が短くなり、髪の毛が一つに束ねられます。


【講評】

ニーズがあり、おしゃれなアイデアであることが評価されました。

伊勢新聞社賞

「ラベルくん」

牧主 敦孝 様

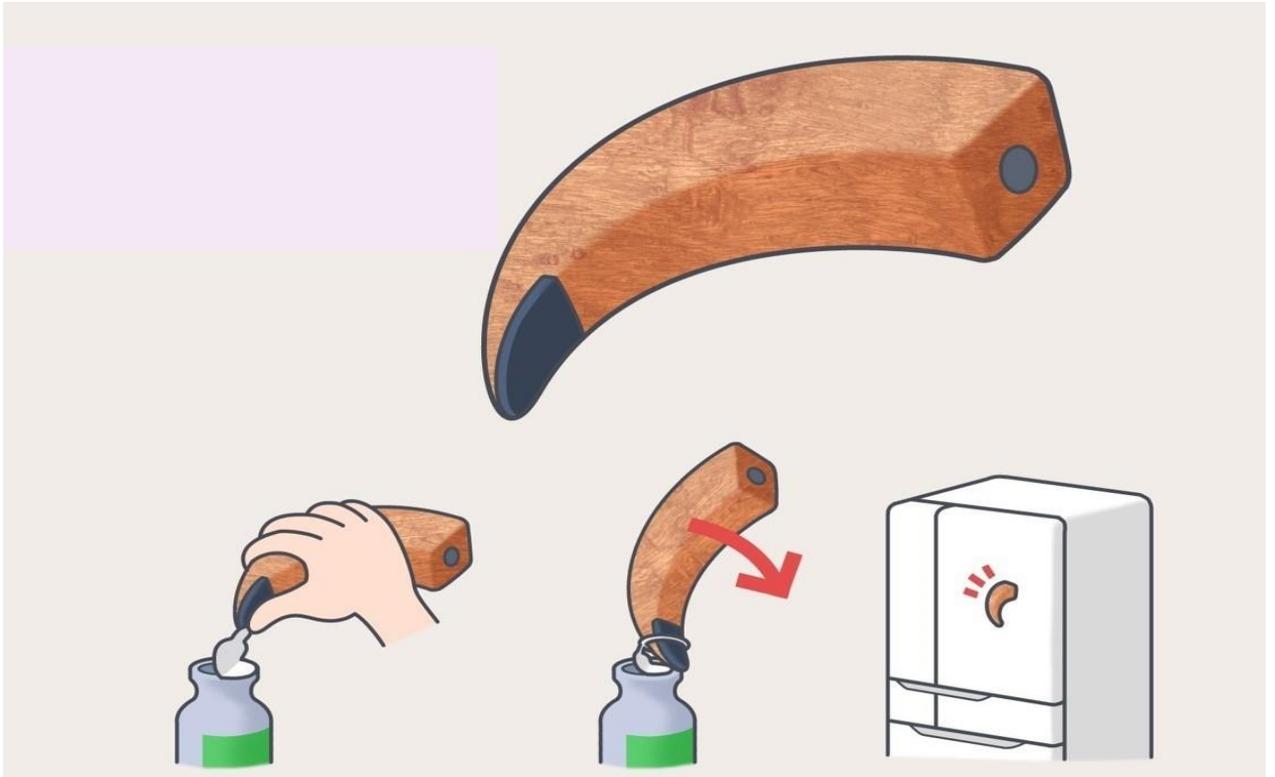

【使い方】

つまみ動作がやりにくい方でも、新品の調味料チューブのアルミシールやボトル調味料の中栓を外すことが出来るアイデアです。

用具の先端のラバーにアルミシールを合わせ親指でアルミシールを押さえながら手前に引くとアルミシールがめくれます。ボトル調味料の中栓はプルリングの奥まで用具を入れ手前に引くと中栓が外れます。用具には磁石が埋め込まれているので使わないときは冷蔵庫などに貼り付けておくことができます。

【講評】

つまむ力がない方でも、テコの原理で楽に開けれる点が評価されました。